

Mirage Quattro™

MASKA TWARZOWA

TECHNOLOGIA CZWARTEJ GENERACJI

Pasuje na więcej użytkowników: maska twarzowa czwartej generacji produkcji ResMed pasuje na ponad 95% użytkowników.*

Uszczelka Mirage™ o podwójnych ściankach wykorzystująca technologię „spring air”: specjalna uszczelka utrzymuje szczelność pomimo otwarcia ust i ruchów wykonywanych podczas snu.

Pokrętko regulacji MicroFit: nowa metoda regulacji wspornika czołowego zapewnia komfort i dopasowanie do indywidualnych wymagań.

Lekkość, cisza i łatwość użycia: zapewnione dzięki kształtowi maski, ulepszonym otworom wylotowym powietrza i szeregowi cech użytkowych przyjaznych dla osoby noszącej maskę.

Pokrętko regulacji MicroFit daje możliwość uzyskania lepszego dopasowania, lepszej szczelności i wyższego komfortu dla powyżej 95% użytkowników*


Ulepszone wyloty powietrza zapewniają minimalny hałas

Ramka mocująca uszczelkę z języczkami umożliwia łatwe odłączenie uszczelki od korpusu maski

Ruchoma membrana uszczelki koło podbródka zapewnia szczelność i pozwala na ruch żuchwy



Membrana – widok boczny uszczelki twarzowej

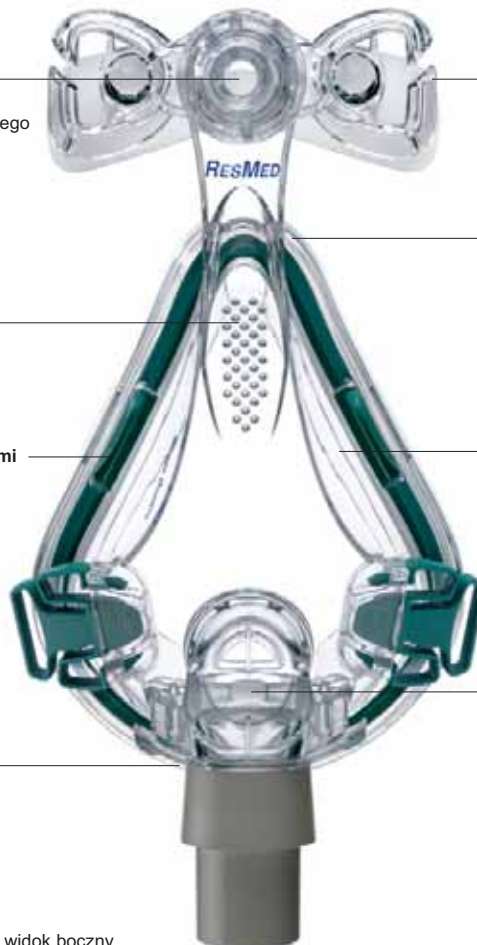

Szczeliny jednorazowej regulacji części nagłownej zachowują optymalne dopasowanie

Ruchoma membrana uszczelki przy nasadzie nosa dopasowuje się do różnych kształtów nosa i zapobiega przedmuchom powietrza w kierunku oczu

Uszczelka Mirage o podwójnych ściankach wykorzystująca technologię „spring air” zapewnia lepszą szczelność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne

Zatrzaski mocujące część nagłowną wymagające jednorazowej regulacji pozwalają na wygodne zdejmowanie maski

Uproszczone kolanko z zaworem zapobiegającym podduszaniu (AAV) niewielka ilość części zapewnia łatwy montaż i demontaż; AAV zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji, gdy przepływ powietrza do maski zostaje zakłócony



RZUT OKA NA TECHNIKĘ

Pokręto MicroFit

24 pozycje do wyboru – wygodne i efektywne dopasowanie dla ponad 95% użytkowników*

- **Regulacja:** możliwość regulacji założonej maski
- **Precyzja:** jeden obrót daje niewielką zmianę pozycji wspornika czołowego
- **Stopniowe działanie:** ruch w kierunku twarzy umożliwia pacjentowi wyczuć optymalnego dopasowania
- **Współpracuje z uszczelką:** w miarę zmiany kąta maski w stosunku do twarzy uszczelka dostosowuje się tak, by zapewnić szczelność w najbardziej niewralgicznych punktach – bez konieczności stosowania zbyt ciasnego dopasowania części nagłownej

ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA UŻYTKOWNIKA

Komfort z możliwością indywidualnego dostosowania

- Pokręto regulacji MicroFit dopasowuje maskę do profilu twarzy użytkownika.
- Uszczelka ust o podwójnych ściankach wykorzystująca technologię „spring air” dopasowuje się do kształtu twarzy i utrzymuje szczelność pomimo ruchów wykonywanych przez sen (również w przypadku otwarcia ust).

Lekka i cicha

- Odpowiedni kształt maski daje uczucie lekkości
- Ulepszone otwory powietrzne zapewniają redukcję hałasu

Ułatwia życie

- Regulacja MicroFit i uszczelka wykorzystująca technologię „spring air” zapewniają prawidłowe dopasowanie maski – za pierwszym i każdym następnym razem
- Mniejsza ilość części składowych maski zapewnia łatwe użytkowanie, czyszczenie, składanie i rozkładanie

ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA LEKARZA LUB TERAPEUTY

Maska pasuje na ponad 95% użytkowników*

- Regulacja MicroFit i uszczelka wykorzystująca technologię „spring air” zapewniają dopasowane maski do większej ilości różnych kształtów twarzy
- Nowy rozmiar maski: XS

Satysfakcja i stosowanie się pacjentów do zaleceń terapeutycznych

- Liczne akcesoria i materiały pomocnicze, w tym torba podróżna, DVD z instrukcjami dbania o maskę, skrócona instrukcja dopasowania i instrukcja obsługi.
- Dzięki możliwości dopasowania za pierwszym razem więcej pacjentów będzie stosować terapię
- Dopasowanie do indywidualnych wymagań, komfort i szczelność zachęcają do stosowania się do terapii na dłuższą metę
- Uproszczone części zapewniają szybkie i łatwe składanie i rozkładanie

Oszczędność czasu i pieniędzy

- Redukcja stanu magazynowego: zmniejszenie ilości numerów katalogowych o 33% w porównaniu z maską Ultra Mirage™ oraz mniejsza ilość części składowych maski
- Redukcja czasu wymaganego na dopasowanie maski i przeszkolenie pacjenta: ulepszona technologia uszczelki zapewnia szybkie osiągnięcie szczelności
- Mniejsza ilość powtórných wizyt: łatwość użycia i dopasowania

NUMERY KATALOGOWE

Maska twarzowa Mirage Quattro

Europa 1 ¹	
Rozmiar XS	61204
Rozmiar S	61205
Rozmiar M	61206
Rozmiar L	61207

Europa 2 ²	
Rozmiar XS	61208
Rozmiar S	61209
Rozmiar M	61210
Rozmiar L	61211

Europa 3 ³	
Rozmiar XS	61228
Rozmiar S	61229
Rozmiar M	61230
Rozmiar L	61231

Francja	
Rozmiar XS	61220
Rozmiar S	61221
Rozmiar M	61222
Rozmiar L	61223

Wlk. Brytania	
Rozmiar XS	61224
Rozmiar S	61225
Rozmiar M	61226
Rozmiar L	61227

Azja i kraje Pacyfiku	
Rozmiar XS	61216
Rozmiar S	61217
Rozmiar M	61218
Rozmiar L	61219

Australia i Nowa Zelandia	
Rozmiar XS	61212
Rozmiar S	61213
Rozmiar M	61214
Rozmiar L	61215

¹ jż. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i niderlandzki

² jż. angielski, szwedzki, norweski, duński, fiński, węgierski, polski i grecki

³ jż. angielski, rosyjski, turecki, czeski, estoński, słoweński, słowacki, bułgarski, rumuński, kotewski i litewski

* Źródło: wewnętrzne dane antropometryczne firmy ResMed