

Mediserv International, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa

[mediserv@mediserv.pl](mailto:mediserv@mediserv.pl), [www.mediserv.pl](http://www.mediserv.pl),

tel.: 22-6327698, 22-8627795, fax.: 22-6327392, kom. 604-919171, 692-495196,

Nr konta bankowego: PEKAO S.A.: 11 1240 2034 1111 0000 0708 4661

**Najcichszy aparat na  
świecie !!!!!!!  
24 dBA przy 10 mbar**

**PROMOCJA**



### Wspólne cechy aparatów firmy ResMed – lidera na rynku światowym


- System łatwego oddechu Easy-Breath zapewnia bardziej naturalny rytm i większy komfort oddychania poprzez obniżanie ciśnienia wydechowego EPR o: 1, 2 lub 3 mbar.
- Optymalizacja oceny zdarzeń i wykrywanie bezdechów obturacyjnych i centralnych.
- Bardzo prosty w obsłudze (duży kolorowy wyświetlacz LCD), mały i bardzo lekki 810 gramów.
- Ciśnienie terapeutyczne od 4 do 20 mbar. Oszczędny w poborze energii elektrycznej (około 10W).
- Zasilany z sieci 100/240VAC lub 12/24VDC poprzez przetwornicę (np. w samochodach).
- System przypominania (wymiana filtra, wymiana maski, przegląd, kontakt z lekarzem).
- Kontrola prowadzenia terapii oraz system zarządzania aparatem i pacjentem.
- Pamięć oraz dołączona do zestawu karta SD, umożliwiającą ocenę używania (S9 Escape) i skuteczność terapii (S9 Elite i S9 AutoSet) bez konieczności przywożenia aparatu do lekarza.
- Aparat umożliwia testowanie szczelności maski i jej dopasowania (S9 Elite i S9 AutoSet).
- Automatyczne włączanie (wykonanie wdechu i wydechu) i wyłączenie (w przeciągu 5s po zdjęciu maski) aparatu bez konieczności naciskania przycisku (S9 Elite i S9 AutoSet).
- Funkcja powolnego narastania ciśnienia RAMP do 45 min w celu ułatwienia zasypiania.

### → S9 AutoSet (autoCPAP + EPR+Diagnostyka)

**Cena od 4870 zł \***

Urządzenie samoregulujące autoCPAP osiągające najlepsze wyniki kliniczne, zapewniając łatwiejsze wdychanie i wydychanie powietrza poprzez automatyczne obniżanie ciśnienia o 1, 2 lub 3 mbar (do wyboru) oraz z technologią AutoSet dostosowującą ciśnienie terapeutyczne do potrzeb pacjenta

AutoSet z EPR

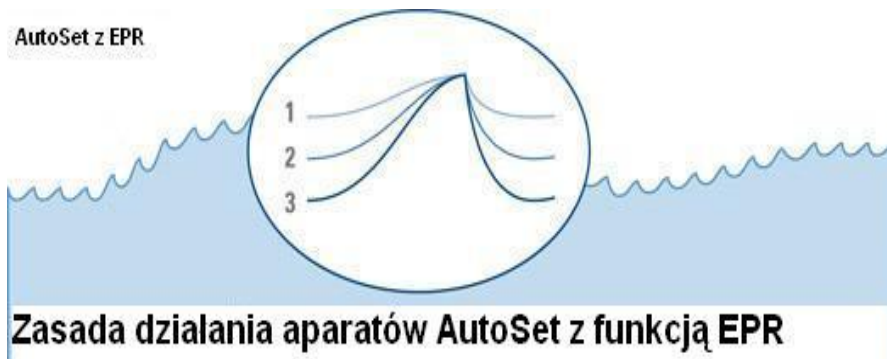


(oddech za oddechem, noc po nocy, rok po roku). AutoSet analizując każdy oddech po oddechu pozwala uzyskać w pełni skuteczną terapię przy jak najniższym ciśnieniu potrzebnym do przeciwdziałania zapadaniu się górnych dróg oddechowych. W przypadku wykrycia zaburzeń oddychania, aparat zwiększa ciśnienie do odpowiedniego poziomu, które zapobiega powstawaniu kolejnych zaburzeń. W przypadku braku zaburzeń, ciśnienie jest stopniowo obniżane do poziomu minimalnego. Aparat posiada pełną funkcję diagnostyczną i kontrolę leczenia (za pomocą karty SD lub na wyświetlaczu LCD) zapisującą informacje o bezdechach obturacyjnych i centralnych, spłyceniach, chrapaniu, przepływie powietrza, przeciekach z maski i podawanym poziomie ciśnienia (przez 365 dni).

## → S9 Elite (CPAP+EPR+Diagnostyka)

Ulepszone urządzenie CPAP ze stałym ciśnieniem. Aparat automatycznie wykrywa moment rozpoczęcia wydechu i obniża ciśnienie przy wydechu EPR o 1, 2 lub 3 mbar (do wyboru), co ułatwia wydech. Aparat posiada pełną funkcję diagnostyczną i kontrolę leczenia (za pomocą karty SD lub na wyświetlaczu LCD) zapisującą informacje o bezdechach obturacyjnych i centralnych, spłygniach, chrapaniu, przepływie powietrza, przeciekach z maski i podawanym poziomie ciśnienia (przez 365 dni).

Cena od 3570 zł\*

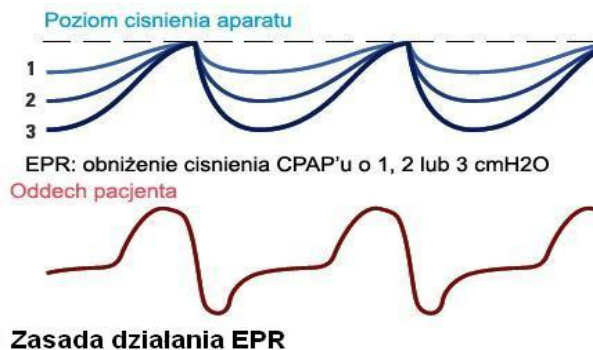

## → S9 Escape (CPAP +EPR) Cena od 2470 zł\*

Ulepszone urządzenie CPAP ze stałym ciśnieniem. Aparat automatycznie wykrywa moment rozpoczęcia wydechu i obniża ciśnienie przy wydechu EPR o 1, 2 lub 3 mbar (do wyboru), co ułatwia wydech oraz pełną gamą udoskonalonych cech związanych z komfortem. Menu w j. polskim.

## → Tango (CPAP) Cena od 2100 zł\*

- Cichy i łatwy w użyciu aparat firmy ResMed ze stałym ciśnieniem CPAP (4-20 mbar).
- Zapewnia efektywną terapię przy wyjątkowo niskiej cenie.
- Kompensacja nieszczelności powietrza w masce i ciśnienia n.p.m.
- Funkcja powolnego narastania ciśnienia (RAMP) w celu ułatwienia zasypiania.
- Nawilżacz powietrza z podgrzewaniem.



## → HumidAire 5i - Nawilżacz z podgrzewaniem do serii S9

- Nawilżacz z podgrzewaniem zwiększa komfort podczas snu (likwiduje suchość i podrażnienia w nosie oraz gardle).
- Proste podłączenie/rozłączenie jednym przyciskiem z aparatem – wspólne zasilanie niewymagające dodatkowych kabli.
- Praktyczne i wygodne napełnianie. Łatwe czyszczenie.

Cena 800 zł



→ **Podgrzewana rura ClimateLine** optymalnie reguluje stopień nawilżania o ustalonej przez pacjenta temperaturze oraz zapobiegając skraplaniu wody w rurce.

\* cena minimalna zestawu (aparat + maska) zależy od rodzaju maski w nim zawartej.

**Oferujemy ponad 10 różnych masek do wyboru do aparatów. Najpopularniejsze to:**

**MICRO:** bardzo cicha silikonowa maska z bardzo delikatnego materiału;

**SWIFT FX:** donosowa, bardzo lekka maska silikonowa, niepowodująca przykrych ucisków w okolicach nosa;

**SWIFT LT:** donosowa, odpowiednik Swift FX, posiada oparcie na kości policzkowe;

**ACTIVA LT:** bardzo stabilna i komfortowa maska dopasowująca się ciągle do Twojej pozycji w czasie snu;

**SOFTGEL:** maska żelowa, bardzo delikatna, szczególnie nie wykazuje odgnieć skóry u nasady nosa;

**TWARZOWA QUATTRO:** dopuszcza otwieranie ust, maska z delikatnego silikonu i regulacją zmniejszającą ucisk, automatycznie uszczelniająca się po podaniu ciśnienia;

**TWARZOWA QUATTRO FX:** zminiaturyzowana wersja maski twarzowej Quattro, brak wsparcia na czoło;

**TWARZOWA LIBERTY:** maska obejmująca usta z wkładkami do nosa, brak wsparcia na czoło;



MICRO  
S, M, L, LW, XL



SWIFT FX  
XS, S, M, L



SWIFT LT  
S, M, L



ACTIVA LT  
S, M, L, LW



SOFTGEL  
S, M, L, LW



QUATTRO  
XS, S, M, L



QUATTRO FX  
S, M, L