

Maska nosowa Ultra Mirage™ II


Zawsze sprawuje się dobrze

Maska nosowa Ultra Mirage™ II firmy ResMed jest odpowiednia dla większości pacjentów wymagających wspomaganie dodatnim ciśnieniem—używających urządzeń CPAP, do terapii dwupoziomowej, lub AutoSet™ ResMed.

Dostępna w czterech rozmiarach poduszek (standardowa, duża, płytka i płytko-szeroka), maska Ultra Mirage II pasuje na większość pacjentów—za pierwszym razem, za każdym razem.

Ultra Mirage II wciąż spełnia standardy masek nosowych pod względem szczelności, wygody i cichej pracy—tak cennych dla skutecznej terapii.

W celu osiągnięcia wyjątkowo cichej pracy, zastosowano tu unowocześnioną technologię dwuwarstwowej poduszki Mirage ResMed i unikalny odpowietrznik.

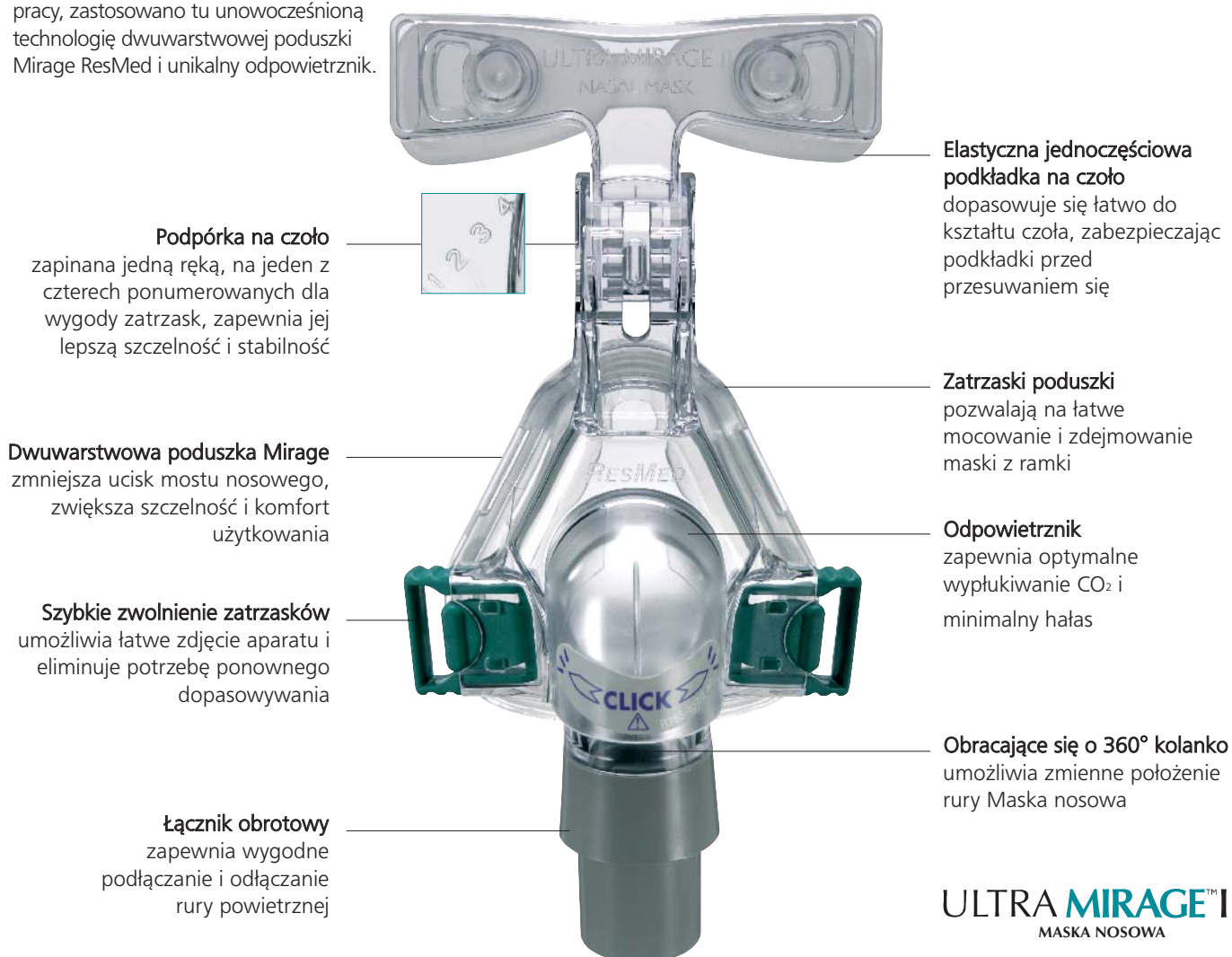

Podpórka na czoło

zapięta jedną ręką, na jeden z czterech ponumerowanych dla wygody zatrzask, zapewnia jej lepszą szczelność i stabilność

Dwuwarstwowa poduszka Mirage

zmniejsza ucisk mostu nosowego, zwiększa szczelność i komfort użytkowania

Szybkie zwolnienie zatrzasków

umożliwia łatwe zdjęcie aparatu i eliminuje potrzebę ponownego dopasowywania

Łącznik obrotowy

zapewnia wygodne podłączanie i odłączanie rury powietrznej

Elastyczna jednoczęściowa podkładka na czoło

dopasowuje się łatwo do kształtu czoła, zabezpieczając podkładki przed przesuwaniem się

Zatrzaski poduszki

pozwalają na łatwe mocowanie i zdejmowanie maski z ramki

Odpowietrznik

zapewnia optymalne wypukowanie CO₂ i minimalny hałas


Obracające się o 360° kolanko

umożliwia zmienne położenie rury Maska nosowa

ULTRA MIRAGE™ II
MASKA NOSOWA

Zaleta technologiczna—unikalny odpowietrznik

- Unikalny odpowietrznik minimalizuje intensywność przepływu powietrza i hałas.
- Powietrze z odpowietrznika odprowadzane jest rurą z dala od pacjenta i jego partnera.
- Odpowietrznik zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni przepływ do wyłukiwania wydychanego CO₂.

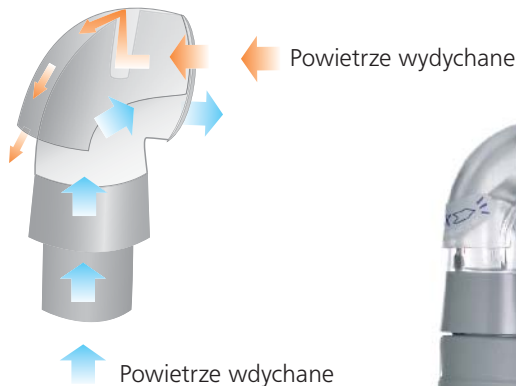

Regulowana podpórka na czoło

- Zapewnia dodatkowe wsparcie zwłaszcza pacjentom wymagającym terapii z zastosowaniem wyższego ciśnienia i/lub terapii dwupoziomowej.
- Oferuje cztery różne ponumerowane położenia napięcia dla uzyskania lepszej szczelności i stabilności.

360° umożliwia pacjentowi wybór najwygodniejszego ustawienia rury.

Bezpieczne i wygodne paski do mocowania

- Zatraski pasków umożliwiają szybkie zamocowanie/odpięcie maski—nie wymagają regulacji po pierwszym dopasowaniu.
- Mocowanie w czterech miejscach zwiększa stabilność maski.

System maski nosowej Ultra Mirage II

Kody produktu

Ameryka Północna i Łacińska		Europa (z wyjątkiem UK) i Azja	
Standard	16548	Standard	16545
Duża	16549	Duża	16546
Płytko	16550	Płytko	16547
Płytko-szeroka	16577	Płytko-szeroka	16578
UK		Australia i Nowa Zelandia	
Standard	16321	Standard	16579
Duża	16322	Duża	16580
Płytko	16323	Płytko	16581
Płytko-szeroka	16324	Płytko-szeroka	16582

Łącznik

- Zapewnia wygodny sposób przyłączenia i odłączenia rury powietrznej bez zdejmowania maski
- Umożliwia poruszanie się pacjenta.

Szybkie dopasowywanie

- Maskę jest dostarczana łącznie z kompletem pasków do mocowania.
- Wszystko co należy zrobić przed rozpoczęciem użytkowania, to dopasowanie podpórki na czoło i pasków mocujących.

Kolanko obrotowe

- Kolanko z możliwością obrotu o



Regulowania podpórka na czoło—cztery wyraźnie ponumerowane położenia



Kolanko obrotowe—zmiennie położenie rury powietrznej